

New

軽い力で曲がる
やわらかい
ペッサリー誕生



産婦人科医が開発

明理会東京大和病院
病院長 明楽重夫 先生

A 型

シリコーン樹脂製



シリコーン樹脂製

患者さまの体形を考慮し、柔軟性を持たせたシリコーン樹脂製。ペッサリー形状が膣の形に応じて変形するため、体への負担を減らすことができ、脱落もしにくくなります。


※大きさにより硬さを変えています。



着脱しやすい ハンドル付きリング


ハンドルにより、自己管理方式・医師管理方式ともに着脱が容易になります。

装着イメージ

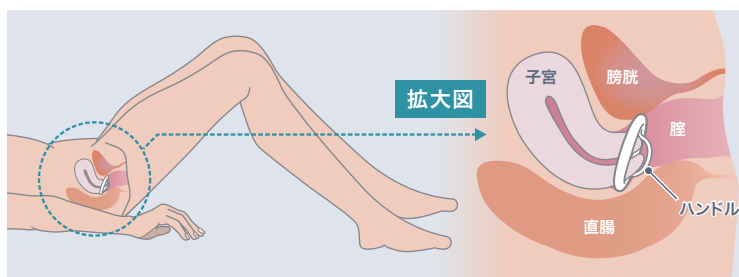


- 前膣円蓋と後膣円蓋の間に装着することで、膀胱下垂を矯正し、子宮頸部の位置を正常に近づけます。
- 取り出しやすいよう、ハンドルが膣口側にくるよう装着します。


挿入方法

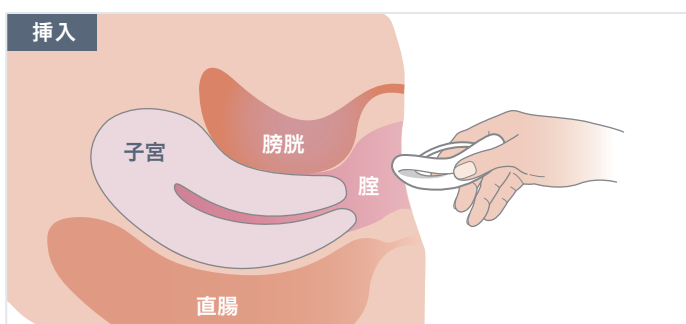


ハンドルが内側になるように持ち、指でペッサリーをイラストのような形にします。

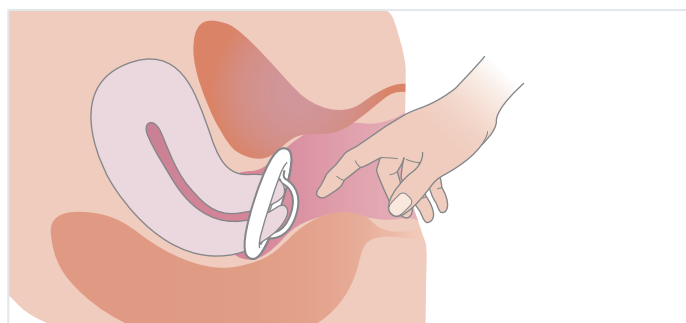

膣口に当てて腔内へ挿入します。前膣円蓋と後膣円蓋の間に置くように装着し、リング直腸側をしっかりと後膣円蓋に押し込みます。

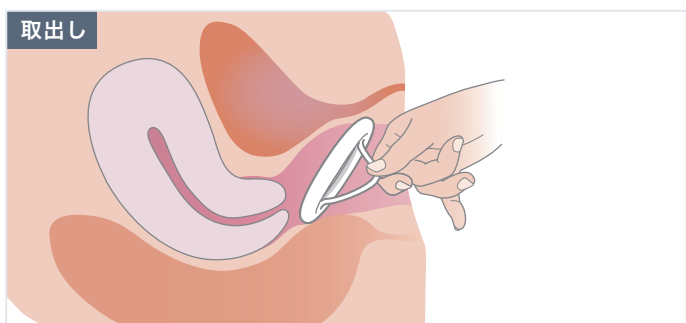

指でハンドルを滑らせるように引きます。

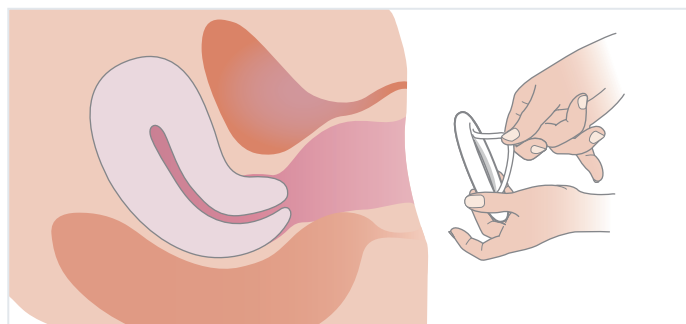

もう片方の手を添えてゆっくり取り出します。

仕様・規格

品番	サイズ	包装単位
KRP-55 - A	Φ 55 mm Atype	1 pcs/pack
KRP-60 - A	Φ 60 mm Atype	
KRP-65 - A	Φ 65 mm Atype	
KRP-70 - A	Φ 70 mm Atype	
KRP-75 - A	Φ 75 mm Atype	
KRP-80 - A	Φ 80 mm Atype	

使用上の注意

○重要な基本的注意

1. 本品の挿入と取り出しは訓練を受けた医師・看護師の下で行うこと。
2. 本品のサイズは医師の診断に基づいて決定すること。

○不具合・有害事象

1. 腔壁の損傷 / 2. 自然脱去 / 3. 出血 / 4. 腸への圧迫・貫通

キタザトリングペッサリー 製品サイトはこちら

キタザトリングペッサリー



<http://www.kitazato-pessary.com/>



KITAZATO®

製造販売元: 株式会社 北里コーポレーション

本社: 〒416-0932 静岡県富士市柳島 100番地 10

東京オフィス: 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目 1番地 8号

販売元: 株式会社 北里ヘルスケア

URL <https://www.kitazato-healthcare.com/>

Mail info_healthcare@kitazato.co.jp Tel. 0545-66-2202

Copyright© Kitazato Corporation All Rights Reserved. | v.5.0 2026.4.15